




Ocliclean Smart Sonic Elektromos Fogkefe

Használati utasítás

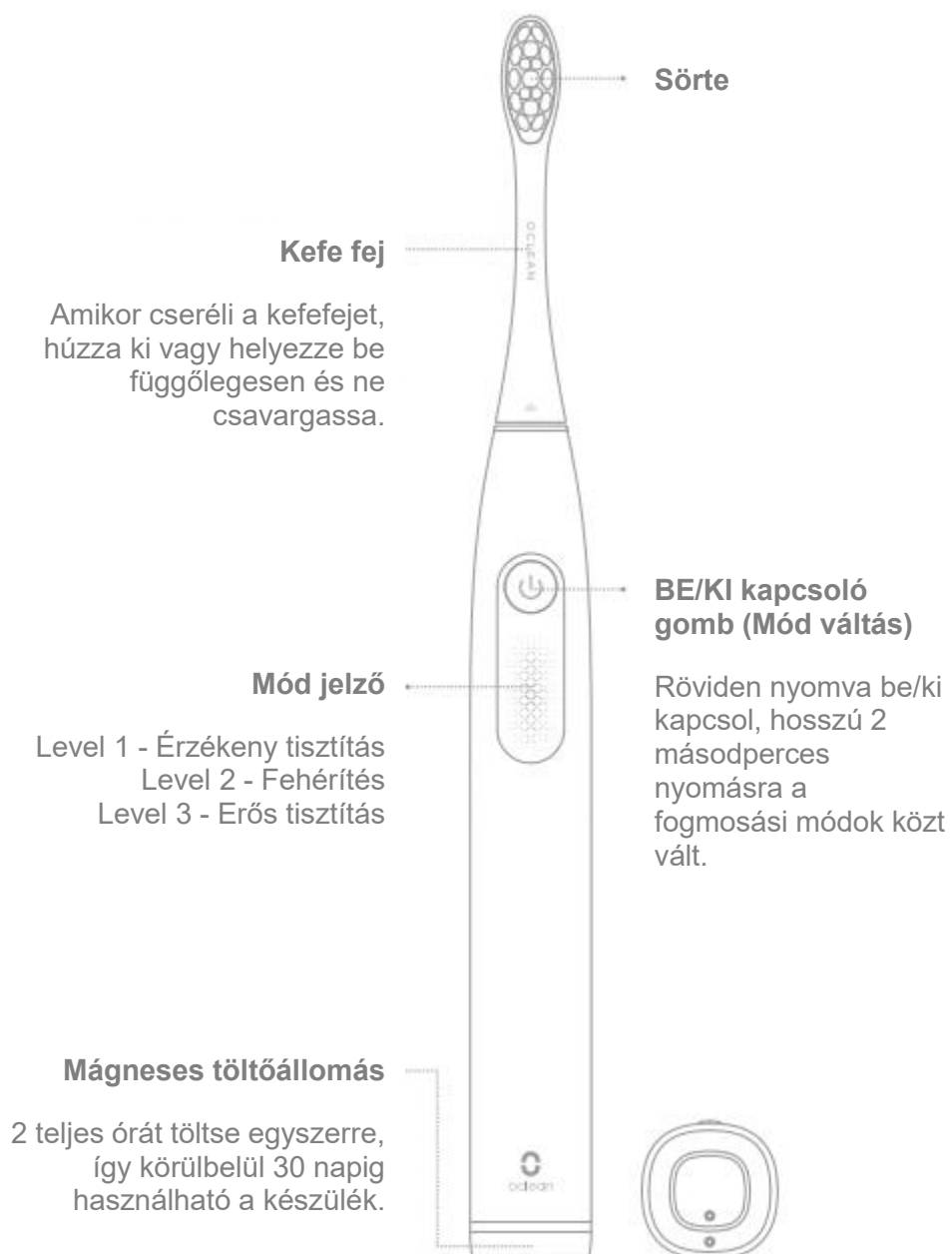

Használat

1. Bekapcsolás

Indítsa el a fogkefét a bekapcsológomb rövid megnyomásával, 2 perces fogmosás után a fogkefe automatikusan kikapcsol.

2. Változtassa meg a fogmosási területet

Amikor a fogkefe működik, vibrációval emlékezteti a felhasználót, hogy 30 másodpercenként fogmosási területet kell változtatni.

3. Intenzitás kapcsoló

Az Oclean F1 háromféle 2 perces fogmosási tervet tartalmaz:

Érzékeny tisztítás (alapértelmezett), fehérítő tisztítás, erős tisztítás.

Az intenzitás váltásához csak tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig működő állapotban.

4. Akkumulátor jelzés

Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 5%, a piros jelzőfény villogni kezd, hogy emlékeztesse a feltöltésre. A jelző villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20%-nál alacsonyabb, a normál használat érdekében rendszeresen fel kell tölteni.

Így emlékeztet az alacsony akkumulátor töltöttségre: A fogkefe nem működik, ha az akkumulátor töltöttsége 5% alatt van. Ekkor a bekapcsológomb rövid megnyomásakor a **piros fény kétszer felvillan**, a motor pedig kétszer rezeg, hogy emlékeztessen arra, hogy az akkumulátor rendkívül alacsony töltöttségű, ebben az esetben újra kell tölteni.

Piros jelzőfény villog, ha az akkumulátor lemerült.

A **fehér** jelzőfény folyamatosan világít, ha az akkumulátor fel van töltve.

| Specifikáció | |
|------------------------|----------------------------------|
| Termék neve | Oclean Sonic Electric Toothbrush |
| Modell | Oclean F1 |
| Max. elfordíthatóság | 140 gf.cm |
| Vízálló | IPX7 |
| Teljesítmény | 1.8W |
| Töltő | USB töltő |
| Bemeneti feszültség | 5V=0.6A |
| Akkumulátor idő | 30 nap* |
| Akkumulátor kapacitása | 800 mAh |
| Töltési idő | 2 óra |

*2 perces fogmosási idővel, napi 2 használattal számolva.

Facebook Oldal



www.facebook.com/ocleanofficial

Kövesse az Oclean Hivatalos Facebook Oldalát



IPX7



| A tartozékok nevei | Mérgező és káros elemek | | | | | | Környezetvédelmi szabályozás |
|--------------------|-------------------------|----|----|------|-----|------|------------------------------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr6+ | PBB | PBDE | |
| Kefefej | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 év |
| Fogantyú | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Töltőállomás | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tartozékok | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Akkumulátor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 év |

○ A mérgező és káros részek ennek az alkatrésznek egybefüggő anyagaiban kevesebb, mint a megengedett minimális mennyiség, ahogy azt a GB/T26572-2011 szerint szabályozzák;

×

A mérgező és káros részek ennek az alkatrésznek egybefüggő anyagaiban több, mint a megengedett minimális mennyiség, ahogy azt a GB/T26572-2011 szerint szabályozzák;

*A termék legtöbb alapanyaga környezetbarát anyag. Aggodalom nélkül használhatja ezt a terméket, nem sért környezetvédelmi előírásokat.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Első pár használatnál viszketést érezhet, vagy enyhe vérzést tapasztalhat, ez normális. Ez azért van így, mert az íny nincs felkészülve a hatékony tisztításra. Ez a tünet általában 1-2 héten belül elmúlik. Amennyiben a tünetek nem múlnak el, ne használja tovább a fogkefét és konzultáljon fogorvosával.

Azok a felhasználók, akik fogászati kezelés, szájsebészeti eljárás alatt állnak, vagy implantátumot viselnek, csak fogorvos felügyelete alatt használják a fogkefét. Azok, akik érzékeny, szuvas foggal rendelkeznek vegyék fel a kapcsolatot fogorvossal a termék használatba vétele előtt.

Az Oclean Flow termék minden biztonsági előírásnak megfelel az elektromágneses készülékekkel kapcsolatban. A pészmekekkel és implantátumokkal kapcsolatban konzultáljon orvosával a termék használata előtt.

Ez a termék csak a fogak, az íny és a nyelv tisztítására használható. Ne használja ettől eltérő célokra. Amennyiben kellemetlenséget, fájdalmat érez, ne használja tovább a fogkefét és konzultáljon orvosával.

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne merítse a töltő kábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a fogkefe megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a fogkefét tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készülék használatát 12 éves kor felett javasoljuk.
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- Nem javasolt a termék használata olyan személyek esetén,

akik szájbetegséggel rendelkeznek, laza a foguk vagy az ínyük, illetve fogínyvérzésük van.

- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy nyitogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a fogkefe felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket az új töltéskor azt tapasztalhatja, hogy a töltés jelző nem világít. Várjon 5-10 percet, hogy elkezdjen tölteni.

A fogkefe tisztítása

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószert, mert károsíthatják a burkolatát.

A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

Használat

Ne ossza meg másokkal a fogkefe használatát.

A készülék csak speciális Oclean szónikus kefefejjével használható. A gyártó és forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget más kefefejjével történő használatból adódó következményért.